

## СОГЛАСОВАНО

Письмо ГУ «Республиканский  
центр гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья»

№ 16-12-01/8128  
04 / 12 / 13  
«04» \_\_\_\_\_ 2013 г.



“Утверждаю”

Директор управляющей компании  
ИП «Инкраслав»  
Аврамчиков М.В.  
«04» \_\_\_\_\_ 2013г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

средства дезинфицирующего с моющим эффектом  
“ИНКРАСЕПТ-10А”  
для дезинфекции и предстерилизационной очистки  
изделий медицинского назначения и дезинфекции поверхностей.

### Производители:

1. ИП “ИНКРАСЛАВ”, Республики Беларусь
2. ООО «ИНВАДЕЗ», Республики Беларусь по лицензии и под контролем  
ИП “ИНКРАСЛАВ”, Республики Беларусь (см. на этикетке)

Вводится взамен Инструкции по применению  
№ 16-12-01/577 от 10.02.2010г.

Вступает в действие с даты утверждения.



Дистрибьютор: Частное предприятие «Стижма»  
210029, г. Витебск-29, ул. Правды, 51-81; e-mail: stizhma@yandex.by; web: www.stizhma.by  
тел. [+375 212] 655 516; GSM [+375 29] 667 41 71, [+375 29] 712 20 54, [+375 29] 712 00 15;

**Аннотация:** настоящая Инструкция вводится взамен Инструкции по применению № 16-12-01/577 от 10.02.2010г. и предназначена для лиц, ответственных за организацию, проведение и контроль противоэпидемических мероприятий на различных объектах хозяйственной деятельности, для персонала и руководителей организаций здравоохранения, центров гигиены, эпидемиологии и других учреждений.

## 1. Общие сведения.

**1.1. Описание:** концентрат “Инкрасепт-10А” представляет собой прозрачную шампунеобразную жидкость от светло-желтого до желтого цвета (без красителя) или голубого цвета (с красителем), без запаха.

**1.2. Состав:** полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 10%, функциональные добавки.

### 1.3. Спектр действия:

- бактерицидный (включая микобактерии туберкулеза, тестировано на штамме *M. terrae*);

- вирулицидный (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, ЕСНО6 – группа вирусов полиомиелита),

- фунгицидный (дрожжевые грибы);

**1.4. Область применения:** средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Инкрасепт-10А» предназначено для применения:

- в организациях здравоохранения различного профиля;
- клинических, серологических и микробиологических лабораториях;
- в патологоанатомических отделениях и бюро судебно-медицинской экспертизы, в моргах, крематориях, траурных залах при оказании ритуальных и похоронных услуг, для дезобработки автокатафалков;
- в учреждениях социальной сферы (приюты, дома инвалидов и престарелых);
- в детских дошкольных и образовательных учреждениях;
- на предприятиях и складах торговли, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности (в том числе на «станциях гигиены»);
- на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте (санитарном, общественном, пассажирском, грузовом, в том числе предназначенном для перевозки продуктов питания), в залах ожидания, комнатах отдыха, санитарных комнатах, камерах хранения и прочих помещениях;
- на предприятиях парфюмерно-косметической, биотехнологической, фармацевтической промышленности (при производстве нестерильных лекарственных средств, в помещениях класса чистоты С и D);
- в парикмахерских, соляриях, салонах красоты, маникюрных и педикюрных кабинетах, салонах пирсинга и татуировки;
- в общежитиях, на производственных предприятиях, объектах коммунально-бытового обслуживания (сауны, бани);
- в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях;
- на спортивных объектах (тренажерные залы, бассейны, залы для занятий травматичными видами спорта) и пр. объектах массового пребывания людей;
- в учреждениях пенитенциарной системы;
- для обеззараживания внутренних поверхностей накопительных баков автономных туалетов, санитарных поверхностей в общественных, автономных туалетах и

биотуалетах, мусороуборочного оборудования и транспорта, мусорных баков, мусоропроводов, технологических помещений, площадок, емкостей и коммуникаций в коммунальном хозяйстве;

- для заполнения дезковриков, дезбарьеров, обработки колес автотранспорта;
- в очагах инфекционных заболеваний, при организации ухода за тяжело больными и лежачими пациентами;
- в комплексе дезинфекционных мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

**1.5. Назначение:** растворы “Инкрасепт-10А” предназначены:

- для **дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой**, изделий медицинского назначения, в том числе хирургических, стоматологических (включая мелкий вращающийся и эндодонтический инструмент), гинекологических, офтальмологических инструментов и инструментов к эндоскопическому оборудованию;
- для **предстерилизационной очистки**, изделий медицинского назначения, в том числе хирургических, стоматологических (включая мелкий вращающийся и эндодонтический инструмент), гинекологических, офтальмологических инструментов и инструментов к эндоскопическому оборудованию;
- для **мытья и дезинфекции** поверхностей в помещениях и на транспорте; крупногабаритного оборудования, поверхностей аппаратов, приборов; жесткой мебели; санитарно-технического оборудования; уборочного материала и инвентаря; предметов ухода за больными; белья (нательного, постельного, спецодежды персонала); посуды (столовой и лабораторной в микробиологических, серологических и клинических лабораториях); игрушек; кувезов для недоношенных детей, пеленальных и инструментальных столиков.
- для дезинфекции пищевых и медицинских отходов (одноразовых ИМН, перевязочного материала и белья, жидкие отходы, включая промывные воды после выполнения эндоскопических манипуляций), биологических жидкостей (моча, кровь, фекалии, рвотные массы, мокрота, амниотические воды и пр.);
- дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов, в том числе с истекшими сроками годности.

**1.6. Совместимость с различными материалами:** растворы средства предназначены для дезинфекции изделий, изготовленных из коррозионностойких металлов и сплавов, любых влагостойких материалов (стекла, фаянса, резины, пластмассы, керамики, линолеума, окрашенной древесины), а так же натуральных, искусственных и синтетических тканей, в том числе ярко окрашенных.

**1.7. Токсиколого-гигиеническая характеристика:** концентрат препарата «Инкрасепт-10А» по параметрам острой токсичности относится к 3 кл. умеренно опасных веществ, рабочие растворы – к 4 кл. малоопасных веществ при введении в желудок, согласно ГОСТ 12.1.007.76. Концентрат оказывает слабое, а рабочие растворы не оказывают раздражающего действия на кожные покровы, относятся к 4 кл. малоопасных веществ. Общезерозорбтивное действие отсутствует. При парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу мало токсичных веществ. В нативном виде оказывает выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, рабочие растворы оказывают слабовыраженное раздражающее действие на слизистые оболочки ( $I_{ir} - 2$ ). Средство малоопасно при ингаляционном воздействии, опасность подострого ингаляционного отравления маловероятна. ПДК в воздухе рабочей зоны полигексаметиленгуанидин

гидрохлорида – 2,0 мг/м<sup>3</sup> (аэрозоль). Средство не обладает кумулятивными свойствами (Ккум.>1 по методу Lim e.a. 1961). По параметрам острой внутрибрюшинной токсичности средство «Инкрасепт-10А» относится к практически нетоксичным веществам (V класс токсичности по ТКП 125-2008), гемолитическая активность смывов 0,85%, что свидетельствует о достаточно полной смываемости препарата с обрабатываемой поверхности в указанных режимах применения.»

#### 1.8. Свойства препарата:

- в рабочих концентрациях не имеет запаха, не раздражают дыхательные пути и глаза;
- хорошо удаляет органические загрязнения и связанные с ними неприятные запахи;
- не обесцвечивает ткани, предназначен для дезинфекции любых влагостойких материалов, не вызывает коррозию металлов;

1.9. Срок годности в оригинальной упаковке производителя **5 лет**;

1.10. Упаковка: полиэтиленовые флаконы и канистры вместимостью 1 л и 5л, 10л, завинчивающиеся крышками с контрольным кольцом. Полимерная тара от 1 до 200 дм<sup>3</sup>.

## 2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы препарата должны готовиться и храниться в стеклянных, пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с крышками.

2.2. Для приготовления рабочих растворов «Инкрасепта-10А», предназначенных для дезинфекции и ПСО, концентрат смешивают с определенным количеством питьевой воды по СанПиН 10-124 РБ 99 комнатной температуры. Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления рабочих растворов представлены в таб 1.

### Приготовление рабочих растворов

Таблица 1.

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления:			
	1литра раб. раствора		10 литров раб. раствора	
	Концентрат, мл	Вода, мл	Концентрат, мл	Вода, л
<b>0,25</b>	2,5	997,5	25	9,975
<b>0,5</b>	5	995	50	9,95
<b>0,75</b>	7,5	992,5	75	9,925
<b>1</b>	10	990	100	9,9
<b>2</b>	20	980	200	9,8

2.3. Категорически запрещается смешивать «Инкрасепт-10А» с другими мощными и дезинфицирующими средствами

- Рабочие растворы стабильны в течение **14 суток**.
- При дезинфекции небольших изделий методом погружения допускается многократное применение рабочих растворов в пределах срока стабильности при условии сохранения их прозрачности.
- В случае помутнения раствора, появления хлопьев или осадка его необходимо заменить.

### 3. Применение растворов средства «Инкрасепт-10А».

3.1. Перед дезинфекцией растворами средства «Инкрасепт-10А» предварительной очистки изделий медицинского назначения от загрязнений не требуется.

3.2. Режимы и способы дезинфекции для различных объектов и по отношению к отдельным видам возбудителей представлены в Таблице 2.

Этапы дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой представлены в Таблице 3.

Этапы и режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения растворами «Инкрасепт-10А» представлены в Таблице 4.

#### Режимы применения рабочих растворов «Инкрасепт-10А».

Таблица 2.

Область применения	Концентрация по препарату, %	Экспозиция, мин	Спектр действия	Способ применения
Дезинфекция поверхностей, предметов ухода, белья, посуды, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря и ветоши, игрушек, кувезов для недоношенных детей и пр.	0,25	60	Режим обеспечивает уничтожение бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и вирусов.	Протирание Орошение Замачивание Погружение
	0,5	30		
	1,0	15		
Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, изделий медицинского назначения.	1,0	30	Режим обеспечивает уничтожение дрожжевых грибов.	Погружение с последующим промыванием.
	1,0	60	Режим обеспечивает уничтожение бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), вирусов, дрожжевых грибов.	
	0,75	60	Режим обеспечивает уничтожение бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов.	
	1,0	30	Режим обеспечивает уничтожение бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), вирусов, дрожжевых грибов.	
	2,0	15		
Дезинфекция жидких пищевых и медицинских отходов, биологических жидкостей	2,0	60	Режим обеспечивает уничтожение бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов.	- смешивание в соотношении 1:1

**3.3. Изделия медицинского назначения**, медицинский инструментарий дезинфицируют способом погружения в рабочий раствор препарата с последующим тщательным промыванием под струей проточной воды в течение 3-х мин.

Инструменты, имеющие замковые части, замачивают раскрытыми, сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Изделия, имеющие каналы и полости дезинфицируют, по возможности, в разобранном виде. Каналы и полости полностью заполняют дезинфицирующим раствором, а затем тщательно промывают под струей проточной воды или шприцем в течение 5 мин.

**3.4. При совмещении дезинфекции и предстерилизационной очистки** необходимо использование двух емкостей.

В 1-й емкости ополаскивания-накопления рабочие растворы средства используются однократно.

Растворы «Инкрасепта-10А» во 2-й емкости могут быть использованы многократно в течение **14 суток** при условии сохранения их прозрачности. **При первых признаках загрязнения** рабочего раствора – появление мути, хлопьев, выпадение осадка, изменение цвета – его **необходимо заменить!**

**Этапы и режимы дезинфекции ИМН, совмещенной с предстерилизационной очисткой.**


Таблица 3.

Материал изделий	Концентрация раствора, %	Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, мин				
		Замачивание в р-ре при комнатной температуре		Мойка изделия	Ополаскивание в проточной питьевой воде	Ополаскивание в дистиллированной воде
		При инфекциях бактериальной, вирусной, грибковой этиологии	При туберкулезе			
Металл, стекло, керамика	0,75	60	-	1	1-2	2
	1,0	30	60			
Резина, Пласт-масса	2,0	15	-	3	2-3	2

**3.5. Предстерилизационная очистка не совмещенная с дезинфекцией** проводится **0,5%** растворами «Инкрасепта-10А», экспозиция 15 мин. Последовательность этапов предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения приведена в табл. 4. При использовании ультразвуковых устройств время экспозиции составляет 5 мин.

**3.6.** Качество предстерилизационной очистки контролируют путем постановки азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, согласно действующим ТНПА.

**3.7.** Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования (но не менее трех единиц).

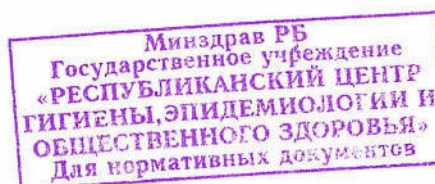

3.8. При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке, до получения отрицательной пробы.

**Этапы и режимы предстерилизационной очистки растворами «Инкрасепт-10А».**

Таблица 4.

Этапы при проведении очистки	Время выдержки, мин
Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов	5-15
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание при помощи ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки, каналов изделий - при помощи шприца	1,0
Ополаскивание проточной питьевой водой	3,0
Ополаскивание дистиллированной водой	1,0

3.9. Предметы ухода за больными обеззараживают, погружая их в раствор препарата с последующим промыванием проточной питьевой водой в течение 1 мин или протирая дважды с интервалом 15 минут ветошью, смоченной рабочим раствором дезинфектанта.

3.10. Пол, стены, мебель, крупногабаритное оборудование и другие поверхности протирают ветошью, смоченной рабочим раствором дезинфектанта, или орошают с помощью гидропульта из расчета 50-100 мл рабочего раствора на 1м<sup>2</sup> поверхности. При использовании метода орошения необходимо добиваться равномерного смачивания поверхности обеззараживаемого объекта. После окончания экспозиционной выдержки поверхности необходимо промыть водой, помещение проветрить.


3.11. Лабораторную посуду, загрязненную биологическими жидкостями (кровь, моча, ликвор, мокрота) дезинфицируют по вирулицидному режиму методом полного погружения в раствор средства «Инкрасепт-10А». В УЗ противотуберкулезного профиля – по туберкулоцидному. В бактериологических лабораториях для дезинфекции лабораторной посуды, загрязненной бактериальной микрофлорой (кроме микобактерий туберкулеза) используют растворы средства по бактерицидному режиму.

3.12. Столовую посуду (с остатками и без остатков пищи) обеззараживают путем погружения в раствор средства на время экспозиционной выдержки с последующим промыванием под струей проточной воды не менее 3-х минут. Расход рабочего раствора на один комплект столовой посуды составляет 2 литра.

3.13. Белье замачивают в емкости с рабочим раствором средства на время экспозиции, после чего стирают в соответствии с утвержденными методиками. Расход средства составляет 4л. на 1 кг сухого белья.

3.14. Медицинские отходы (одноразовые изделия медназначения, перевязочные материалы, белье и т.п.) перед утилизацией погружают или полностью заливают рабочим раствором средства. Режим дезинфекции соответствует профилю УЗ.

Жидкие пищевые или медицинские отходы и биологические жидкости смешивают с 2% рабочим раствором средства «Инкрасепт-10А» при соотношении 1:1 и экспозиции 60 минут.

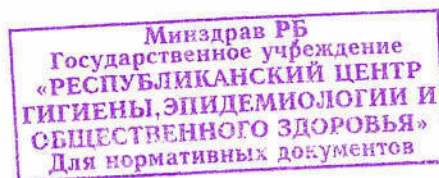

**3.15. Уборочный материал** (ветошь) замачивают в рабочем растворе средства, после чего его стирают в том же растворе, выполаскивают и высушивают.

**3.16. При генеральной уборке** в УЗ предварительную мойку поверхностей проводят с применением 0,25% раствора «Инкрасепта-10А». Средство обладает моющими и дезинфицирующими свойствами, что повышает эффективность последующей дезинфекции. Ополаскивание поверхностей перед дезинфекцией не требуется. Дезинфекция проводится способом протирания или орошения с применением раствора средства по вирулицидному режиму (в УЗ туберкулезного профиля – по туберкулоцидному). По окончании экспозиции все поверхности ополаскивают водопроводной водой. Помещение проветривают в течение 15-30 мин.

**3.17. При проведении заключительной дезинфекции** в очаге инфекционного заболевания необходимо руководствоваться режимами, эффективными против микроорганизмов, вызвавших данную патологию. После окончания заключительной дезинфекции необходимо провести влажную уборку помещения и проветривание.

#### **4. Меры предосторожности**

**4.1.** К работе со средством **не допускаются** лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями, имеющими индивидуальную непереносимость компонентов средства.

**4.2.** Предварительные и текущие медосмотры работающих необходимо проводить согласно «Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденной Постановлением МЗ РБ № 47 от 28.04.2010г.

**4.3.** При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания концентрата в глаза и на кожу, рекомендуется защищать глаза (защитные очки) и руки (резиновые перчатки).

**4.4.** Дезинфекцию рабочими растворами «Инкрасепт-10А» необходимо проводить в резиновых перчатках.

Дезинфекцию поверхностей рабочими растворами «Инкрасепта-10А» методом протирания допускается проводить в присутствии пациентов, в том числе детей. Использование *средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом* не требуется. Следует избегать попадания средства на слизистую оболочку глаз.

При проведении дезинфекции **методом орошения** персонал должен использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маску или универсальный респиратор типа РПГ-67 или РУ 60М с патроном марки А, а так же защищать глаза герметичными очками. Присутствие посторонних лиц в помещении не допускается.

**4.5.** После проведения дезобработки необходимо вымыть руки с мылом.

**4.6.** Курить, пить и принимать пищу во время дезинфекции запрещается.

**4.7.** «Инкрасепт-10А» следует хранить в недоступном для детей месте, отдельно от лекарств и продуктов питания.



## 5. Первая помощь при случайных отравлениях

5.1. При случайном попадании препарата в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, затем принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля. В случае появления клинических симптомов отравления - слабость, головокружение, тошнота, рвота, боль в эпигастрии - **обратиться к врачу!**

5.2. При попадании концентрированного средства или его рабочих растворов в глаза следует немедленно тщательно промыть их большим количеством проточной питьевой воды в течение 1-5 мин. В случае сохранения в течение длительного времени резкой боли, слезотечения, выраженного отека и покраснения век и конъюнктивы – **обратиться к офтальмологу!**

5.3. При попадании средства на кожу – смыть его большим количеством воды с мылом, сменить одежду.

5.4. При применении «Инкрасепта-10А» методом орошения без средств защиты органов дыхания возможно раздражение органов дыхания (горький вкус во рту, першение в горле, пощипывание в носу, кашель, слезотечение, затрудненное дыхание). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко, минеральную воду). При значительной выраженности симптомов - обратиться к врачу.

## 6. Транспортировка и хранение.

6.1. Транспортировать средство допускается всеми видами транспорта, гарантирующими сохранность оригинальной упаковки и соблюдение условий хранения продукта.

6.2. Препарат не горюч, не ядовит, не содержит окислителей, радиоактивных и коррозионно-активных веществ.

6.3. Хранить в местах, недоступных детям, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов при температуре не ниже 0°C. Избегать попадания на упаковку прямых солнечных лучей.

6.4. В случае непреднамеренного попадания в окружающую среду проводить уборку в резиновых перчатках. Специальные меры личной безопасности не требуются. Место разлива необходимо засыпать песком, песок собрать и вывести в предназначенное для технологических отходов место.

## 7. Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства «Инкрасепта-10А»

Средства контролируется по показателям, представленным в таб. 5.

Таблица 5.

Наименование показателя	Норма и характеристика
1. Внешний вид при (20±2)°С	Однородная прозрачная или опалесцирующая жидкость
2. Цвет	От бесцветного до голубого
3. Водородный показатель, ед. рН	7,5±1,0

6. Массовая доля активно-действующего вещества: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %	9,0-11,0
---	----------

**Определение внешнего вида и цвета.** Внешний вид и цвет определяют визуально, просмотром пробы в количестве около 20-30 мл в стакане вместимостью 100 мл по ГОСТ 25336 на фоне листа белой бумаги в проходящем или отраженном дневном свете или свете электрической лампы.

**Определение водородного показателя (рН).** Определение водородного показателя (рН) Инкрасепта-10А поводят для нативного препарата по ГОСТ 22567.5.

**Определение массовой доли активно-действующего вещества – полигексаметилен-гуанидин гидрохлорида.**

Метод основан на образовании активным веществом – полигексаметиленгуанидин гидрохлоридом, соединения с эозином. В результате взаимодействия гуанидиновых группировок полигексаметиленгуанидина гидрохлорида с эозином происходит изменение окраски водного раствора эозина от оранжевого до розового цвета. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации активного вещества.

**Аппаратура, реактивы:**

- весы лабораторные по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г и максимальной допустимой погрешностью  $\pm 0,75$  мг;
- весы лабораторные по ТНПА с наибольшим пределом взвешивания 1500 г и максимальной допустимой погрешностью  $\pm 100$  мг;
- колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП или любой другой с аналогичными характеристиками;
- секундомер по ТУ 25-1894.003 или любой другой с аналогичными характеристиками;
- колбы мерные вместимостью 50 мл и 100 мл по ГОСТ 25336;
- колбы конические вместимостью 100 мл по ГОСТ 1770;
- стаканы вместимостью 100 мл по ГОСТ 25336;
- пипетки вместимостью 1, 5, 10 мл по ГОСТ 29227;
- палочка стеклянная по ТНПА;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- эозин Н (индикатор) по ТУ 6-09-183;
- полигексаметиленгуанидин гидрохлорид по ТУ 9392-001-32963622 или другим ТНПА;
- моноалкиловые эфиры полиэтиленгликоля на основе триммеров пропиленоксиэтилированные по ТНПА.

Допускается замена реактивов на аналогичные по чистоте, выпускаемые по другим ТНПА.

**Приготовление раствора эозина с массовой долей 0,05%.** 0,05 г индикатора эозина взвешивают с точностью до 0,001г в стакане вместимостью 100 мл и доводят массу раствора до 100 г с точностью до 0,1г дистиллированной водой.

*Приготовление раствора сравнения.* В мерную колбу вместимостью 50 мл наливают 40 мл дистиллированной воды, добавляют 0,4 мл раствора эозина, перемешивают и доводят до метки дистиллированной водой. Раствор помещают в кювету фотоколориметра с толщиной слоя 50 мм.

*Приготовление эталонных растворов.* В конической колбе вместимостью 100 мл взвешивают с точностью до 0,001 г 4,5 г полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, добавляют 20 мл воды дистиллированной. В ту же колбу добавляют 5,0 г моноалкиловых эфиров полиэтиленгликоля на основе триммеров пропиленоксиэтилированных. Взвешивание проводят с точностью до 0,1 г. Перемешивают компоненты до полного растворения и затем доводят массу раствора до 50 г с точностью 0,001 г дистиллированной водой – эталонный раствор № 1.

Для приготовления эталонного раствора № 2 в конической колбе вместимостью 100 мл взвешивают с точностью до 0,001 г 5,5 г полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, затем приготовление ведут таким же образом, как и эталонного раствора № 1.

*Проведение анализа.*

По 1 мл эталонных растворов помещают в мерные колбы вместимостью 100 мл и доводят до метки водой дистиллированной. По 1 мл полученных растворов помещают в мерные колбы вместимостью 100 мл и доводят до метки водой дистиллированной.

1 мл Инкрасепта-10А помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят до метки водой дистиллированной. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят до метки водой дистиллированной.

По 5 мл эталонных растворов и 5 мл исследуемого раствора помещают в мерные колбы вместимостью 50 мл. Добавляют по 40 мл воды дистиллированной и по 0,4 мл индикатора эозина, доводят до метки водой дистиллированной, перемешивают. Через 12 мин помещают в кювету с толщиной слоя 50 мм и определяют оптическую плотность по отношению к раствору сравнения на фотоэлектроколориметре при длине волны 540 нм, зеленый светофильтр.

*Обработка результатов.*

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида ( $C_x$ ) вычисляют в % по формуле (1):

$$C_x = \frac{C_1 + (C_2 - C_1) (A_x - A_1)}{(A_2 - A_1)} \quad (1)$$

где  $C_1$  — концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в эталонном растворе № 1, %;

$C_2$  — концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в эталонном растворе № 2, %;

$A_1$  — оптическая плотность эталонного раствора № 1;

$A_2$  — оптическая плотность эталонного раствора № 2;

$A_x$  — оптическая плотность исследуемого раствора.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

*(уполномоченный орган стороны)*

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

*(руководитель уполномоченного органа)*

г. Минск

*(наименование административно-территориального образования)*

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.002.E.002056.04.14 от 16.04.2014

Продукция:

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Инкрасепт-10А", ТУ BY 800001978.015-2006, изв.об изм. № 1-2, РЦ BY 800001978.015-2006. Приложение к свидетельству о государственной регистрации на 1 стр.  
Область применения: согласно инструкциям по применению предприятия изготовителя, согласованным с МЗ РБ (письмо ГУ Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья № 16-12-01/8128 от 04.12.2013 г.) и №№ 1418, 1419, 1420 от 21.03.2007 г. Изготовитель: ИНКРАСЛАВ Унитарное предприятие УНП:800001978 Минский район, д. Боровляны, БЕЛАРУСЬ (адрес: 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, 19). Адрес(а) производств(а): БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, 19. Получатель: ИНКРАСЛАВ Унитарное предприятие УНП:800001978 Минский район, д. Боровляны, БЕЛАРУСЬ (адрес: 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, 19)

*(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)*

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава II, раздел 20, раздел 5

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании  
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

В.В. Гринь

М.П.

BY № 0062413



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации

№ ВУ.70.06.01.002.Е.002056.04.14 от 16.04.2014

Настоящее свидетельство выдано на основании: протоколов № 0115/5860/08-02 от 21.06.2011г. ГУ "РНПЦ", акта № 15330-15335-10-01-490-4-5 от 31.12.2009 г., № 1462 от 04.12.2009 г. ГУ "РНПЦЭиМ", заключения комиссии по средствам дезинфекции при МЗ РБ от 05.08.2011 г., № 0115/5494/08-02 от 27.05.2013 г., № 0115/9038/08-02 от 26.09.2013 г. ГУ «РНПЦГ», протоколов испытаний антимикробной активности № 41ВД/209-235/10613-10615 от 23.05.2013 г. ГУ «МГЦГиЭ», № 3898-3904/10-05/22-28 от 23.05.2013 г. ГУ «РЦГЭиОЗ», протокола испытания вирулицидного действия № 18/Р от 20.05.2013 г. ГУ «РНПЦЭиМ», заключения комиссии по средствам дезинфекции при МЗ РБ № 92 от 19.12.2013 г., СГР № ВУ.70.06.01.002.Е.006555.12.13 от 23.12.2013г.

Главный врач ГУ "Республиканский центр  
гигиены, эпидемиологии и общественного  
здоровья"



В.В. Гринь

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
СООБЩЕСТВО

